

szafa chłodniczo-chłodnicza

SLC / SLC 300

+2...+10 / +2...+10



R 290

Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwzmrożeniowy



Otwór walidacyjny



2 koła z hamulcem oraz
2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi
do poziomowania



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 60 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Drzwi prawe
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury co 0.1K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- System przeciwzamrożeniowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 4 półki powlekane z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Szuflada 75 mm z przegrodami
- Szuflada 150 mm
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Drzwi lewe
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM

+ DODATKOWE USŁUGI:



Kwalifikacja Instalacyjna



Kwalifikacja Operacyjna



Kwalifikacja Procesu (działania)

LAUREAT KONKURSU




TERAZ POLSKA

Bolarus

since 1962

szafa chłodniczo-chłodnicza

SLC / SLC 300

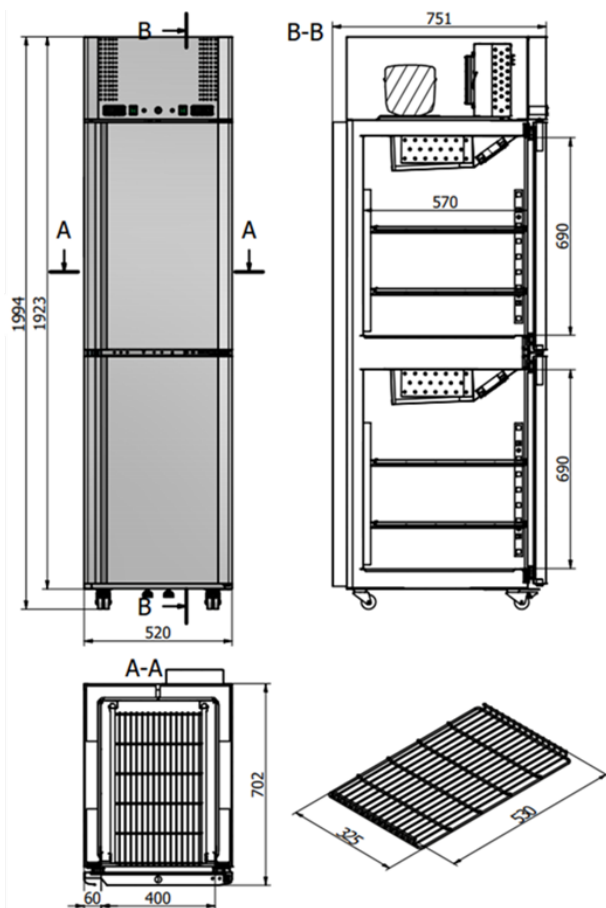

Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwzmrożeniowy



Otwór walidacyjny



2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania

Dane techniczne

	Szer.	Gł.	Wys.
Wymiary zewnętrzne [mm]:	520	751 (702)	1994
Wymiary wewnętrzne [mm]:	400x2	570x2	690x2
Typ agregatu:	wewnętrzny		
Rodzaj chłodzenia:	dynamiczne		
Pojemność brutto komory 1:	150 [dm ³]		
Pojemność brutto komory 2:	150 [dm ³]		
Pojemność netto komory 1:	120 [dm ³]		
Pojemność netto komory 2:	120 [dm ³]		
Ciężar własny:	120[kg]		
Max. załadowanie:	120[kg]		
Ilość półek:	4		
Ilość prowadnic / wsporników poziomych:	8		
Max. obciążenie półki:	30 [kg]		
Zakres temperatur:	+2...+10 [°C]		
Warunki otoczenia:	+25 [°C] przy 60% HR		
Czynnik chłodniczy:	R290		
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]		
Ilość drzwi zewnętrznych:	2		
Dobowe zużycie energii:	3.0 [kWh/24h] / 3.0 [kWh/24h]		
Poziom hałasu:	53 [dB]		
Moc znamionowa:	300/300 [W]		
Prąd znamionowy:	1.3/1.3 [A]		

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

Bolarus
since 1962