



Wytrząsarki typu vortex do mikro płytek



Przeznaczone do wydajnego, równomiernego wytrząsania mikro płytek

Wytrzymałe wytrząsarki typu vortex do mikro płytek są w szczególności przeznaczone do pracy w trybie ciągłym w pełnym przedziale prędkości. Modele analogowe ze zmienną prędkością i modele cyfrowe sterowane mikroprocesorem oferują dokładną kontrolę prędkości, jeśli zastosowanie wymaga powtarzalnych wyników. Wysoka prędkość mieszania i mała orbita tych wytrząsarek sprawia, że są idealne do skutecznego mieszania mikro płytek. Zestaw zawiera również nasadkę do mieszania pojedynczych próbek.

Standardowe właściwości:

- **Unikalny sposób mocowania reduktora do akcesoriów zapewnia bezpieczne miksowanie**
Bezpieczny adapter do płytek wytrząsarki vortex umożliwia bezpieczne działanie urządzenia w całym przedziale prędkości — w przeciwieństwie do innych urządzeń dostępnych na rynku, w których prędkość wytrząsania ograniczają zastosowane akcesoria.
- **Sterowanie za pomocą touchpada z niezależnymi wyświetlaczami LED wyświetlającymi prędkość i czas (modele cyfrowe)**
Sterowanie z poziomu panelu dotykowego umożliwia łatwe wprowadzanie ustawień. Mikroprocesor utrzymuje określoną prędkość, zapewniając równomierne mieszanie. Programator czasowy wyświetla upływ czasu, a po zaprogramowaniu na określony czas wyłączy urządzenie, kiedy czas się skończy.
- **Model analogowy stanowi ekonomiczną alternatywę wobec modelu cyfrowego**
Model wytrząsarki o zmiennej prędkości to doskonała opcja w przypadku zastosowań niewymagających dokładnej regulacji prędkości i czasu. Wysoka prędkość mieszania w połączeniu z małą orbitą umożliwia wydajne mieszanie mikro płytek.

Wytrząsarki typu vortex do mikro płytek

Model	VXMPAL	VXMPDG
Sterowanie	Analogowy	Cyfrowy
Zakres prędkości	Tryb pracy, 300 obr./min – 2500 obr./min Tryb dotykowy, 300 obr./min – 3500 obr./min	
Orbita	3,5 mm	
Tryb pracy	Ciągła	
Zakres	2 mikro płytki	
Warunki pracy	od 4°C do 40°C, wilgotność względna 20%-85%, bez kondensacji	
Zasilanie	230 V, 0,13 A, 50/60 Hz	
Moc	30 W	
Wymiary (szer. × dług. × wys.)	137 × 266 × 114 mm	
Masa netto	5,3 kg	

Pozostałe funkcje i wyposażenie oferowane w standardzie

Odłączany 3-żyłowy przewód z wtyczką (w zestawie), pojedynczy uchwyt na mikro płytkę i nasadka (w zestawie)

Zgodność z normami

- Bezpieczeństwo produktu: EN 61010-1, EN 61010-2-051
- Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1 klasa A, środowiska przemysłowe
- Oznaczenia zgodności: CE; RCM; TÜV SÜD


Akcesoria

Nakładka dla wytrz. vortex VXHD i VXMP 30400210

Uchwyt na 2 mikro płytki 30400213

Uchwyt na mikro płytkę, pojedynczy 30400215

Wymiary

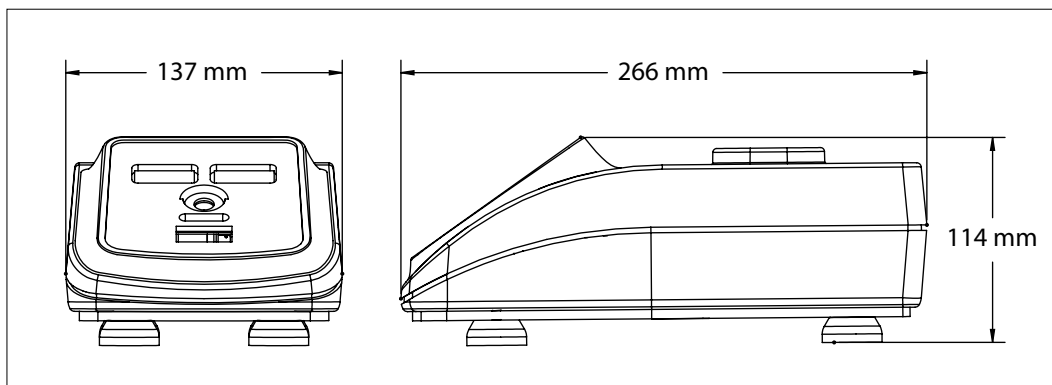

OHAUS Europe GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee
Szwajcaria

E-mail: ssc@ohaus.com
Tel.: 0041 22 567 53 19
E-mail: tsc@ohaus.com
Tel.: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

System zarządzania produkcją
tego wyrobu posiada
certyfikat ISO 9001:2015.

CH16E209

